

**PrintMate™**  
automatischer Kassettendrucker  
von Thermo Scientific



**PrintMate von Thermo Scientific    Drucker für 450 Kassetten**

**flexibel**  
**anschlußfähig an LIMS**  
**zuverlässig**  
**schnell**  
**eindeutig**

## Der PrintMate von Thermo Scientific ist zeit- und geldsparend und minimiert Probenverwechslungen

### Flexibel

PrintMate kann entsprechend Ihrer Arbeitslast im Labor erweitert werden. Durch die optionale Verwendung von 2 bis 12 Magazinen kann Ihr neuer Drucker bei geänderter Arbeitslast angepasst werden.

### Kleine Standfläche: ideal geeignet für alle Arbeitsabläufe

PrintMate ist ganz auf Sie zugeschnitten. Er ist sehr robust und arbeitet zuverlässig als Massendrucker in Labors mit hohem Arbeitsaufkommen.

- durch kompakte Größe an einzelnen Zuschneidestationen einsetzbar
- Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung an zwei Arbeitsplätzen

### Anschlußfähig an LIMS

- mit den meisten LIS-Schnittstellen kompatibel
- mit allen Softwareanwendungen von Thermo Scientific Shandon MicroWriter™ kompatibel
- Verbindung über USB- oder RJ45-Ethernet-Anschluss

### Sammelsystem

Ein Sammelsystem nimmt bis zu 100 Kassetten in Tablett auf. Die Tablett lassen sich problemlos stapeln und vereinfachen das Zuordnen von Kassetten zu Probenbehältern an der Zuschneidestation.

### Bedarfsgerechtes Drucken

Durch die LabWriter™ Drucksoftware können Sie Daten für große Serien oder einzelne Kassetten mühelos mit Standard- oder Spezialnummerierungseinstellungen eingeben.

- Verwendung von Barcodes vom Anforderungsschein zum automatischen Bedrucken von Kassetten: Fehler beim Übertragen sind ausgeschlossen.
- Durch die Sammelrutsche kann zwischen zwei Fachkräften ein PrintMate ohne die Gefahr von vertauschten Kassetten aufgestellt werden.
- Problemloses Bedrucken zusätzlicher Kassetten
- Drucken von jeweils einem Fall, dadurch keine Gefahr von vertauschten Kassetten
- Passt gut in eine Zuschneidestation
- Ermöglicht einen Ausdruck mit den Daten der bedruckten Kassetten
- Integrierbar in knapp bemessene Arbeitsablaufanforderungen

## Ein vertrauenswürdiger Name mit langer Branchenerfahrung...

Thermo Scientific ist eine vertrauenswürdige Marke. Thermo Scientific-Geräte werden seit mehr als zwanzig Jahren hergestellt und optimieren die Probenkennzeichnung.

Wir arbeiten weiterhin mit dem gleichbleibenden grundlegenden Druckverfahren, das sich als zuverlässig und haltbar bewährt hat. Unser neues Drucksystem baut auf diesem Erfolg auf und nutzt eine innovative und schnellere Druckkopftechnologie, auf die Sie sich zur genauen, dauerhaften und lesbaren Probenkennzeichnung verlassen können.



### Probensicherheit: minimierte Fehler

Der hochwertige Druck des PrintMate sorgt für klar gekennzeichnete Kassetten. Die optimierte Probenkennzeichnung sowie die Genauigkeit und Probenintegrität tragen zu einer besseren Patientenversorgung bei.

## Für genaue Ergebnisse muß sich Ihr Arbeitsablauf nicht verlangsamen!

Unterschiedlichste Arbeitsabläufe im Labor erfordern eine individuelle Lösung... wählen Sie die passende Option für Ihr Labor.

### PrintMate von Thermo Scientific Drucker für 900 Kassetten

- **Thermo Scientific PrintMate 150** für bis zu 150 Kassetten
- **Thermo Scientific PrintMate 450** für bis zu 450 Kassetten
- **Thermo Scientific PrintMate 900** für bis zu 900 Kassetten



### Hochwertiges Drucksystem


Leicht lesbarer Druck in dauerhaft haltbarer schwarzer Schrift. Der Druck eignet sich ideal für lineare und 2D-Barcodes sowie für Grafiken und Logos.

- keine Druckpatronen nötig
- keine Reinigungspatronen nötig
- keine Spezialbeschichtungen nötig
- keine besonderen Härtungsverfahren nötig

### zuverlässig: keine Blockierungen

Das patentierte Ausgabesystem ermöglicht zuverlässig die Ausgabe einer Vielfalt von Standardkassetten ohne Blockierungen.

PrintMate ist ein Drucker, bei dem Sie Ihre bevorzugten Kassetten zuverlässig verwenden können.

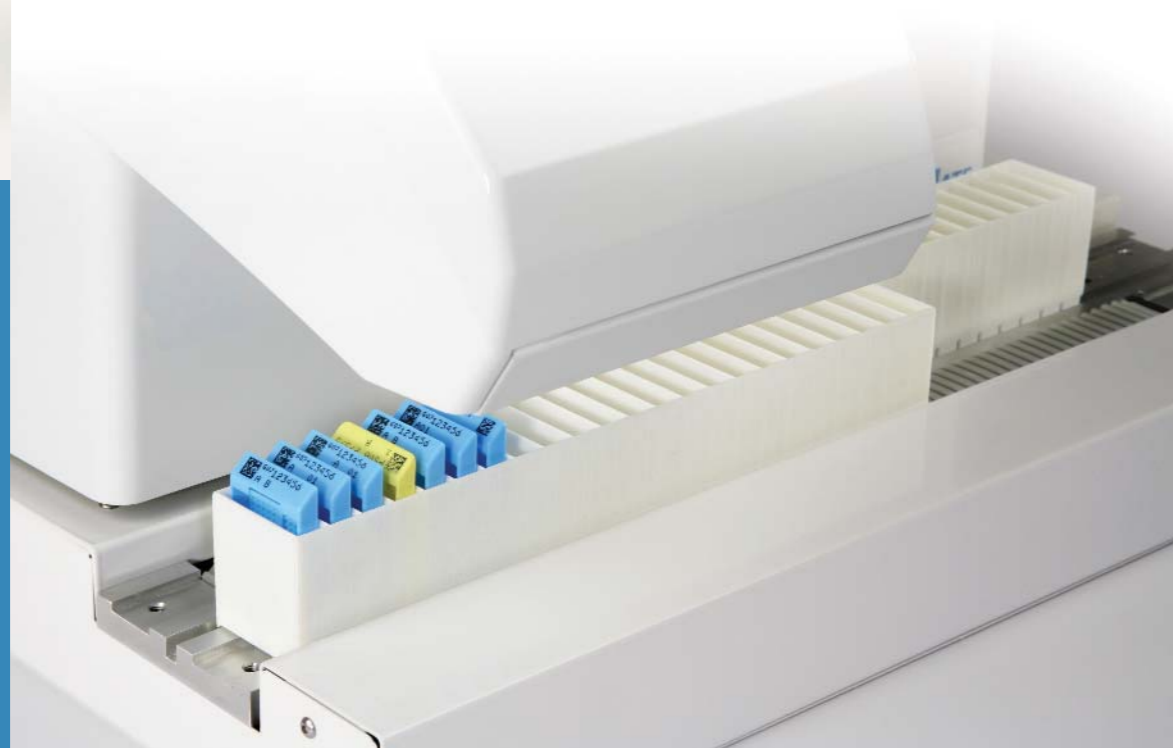



## Spezifikationen des PrintMate-Druckers von Thermo Scientific

Beschreibung	Bestellnummer
PrintMate-Drucker für 150 Kassetten, 100-240 V, 50/60 Hz, 100 VA, 100 W. <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> PrintMate mit 2 Hopperrn, USB-Kabel, Netzkabel, 2 Hopper, 1 Folienbandrolle (installiert), CD mit Basissoftware, Bedienungsanleitung.	A7950001
PrintMate-Drucker für 450 Kassetten, 100-240 V, 50/60 Hz, 100 VA, 100 W. <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> PrintMate mit 6 Hopperrn, USB-Kabel, Netzkabel, 6 Hopper, 1 Folienbandrolle (installiert), CD mit Basissoftware, Bedienungsanleitung.	A7950002
PrintMate-Drucker für 900 Kassetten, 100-240 V, 50/60 Hz, 100 VA, 100 W. <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> PrintMate mit 12 Hopperrn, USB-Kabel, Netzkabel, 12 Hopper, 1 Folienbandrolle (installiert), CD mit Basissoftware, Bedienungsanleitung.	A7950003

## PrintMate-Drucksysteme für Kassetten von Thermo Scientific

Beschreibung	Bestellnummer
PrintMate-Drucksystem für 150 Kassetten, 100-240 V, 50/60 Hz, 150 VA, 150 W. <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> PrintMate mit 2 Hopperrn, USB-Kabel, Netzkabel, 2 Hopper, 1 Folienbandrolle (installiert), CD mit Basissoftware, Bedienungsanleitung, PC mit Monitor, digitaler Bildwandler.	A7950004
PrintMate-Drucksystem für 450 Kassetten, 100-240 V, 50/60 Hz, 150 VA, 150 W. <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> PrintMate mit 6 Hopperrn, USB-Kabel, Netzkabel, 6 Hopper, 1 Folienbandrolle (installiert), CD mit Basissoftware, Bedienungsanleitung, PC mit Monitor, digitaler Bildwandler.	A7950005
PrintMate-Drucksystem für 900 Kassetten, 100-240 V, 50/60 Hz, 150 VA, 150 W. <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> PrintMate mit 12 Hopperrn, USB-Kabel, Netzkabel, 12 Hopper, 1 Folienbandrolle (installiert), CD mit Basissoftware, Bedienungsanleitung, PC mit Monitor, digitaler Bildwandler.	A7950006

## Zubehör für PrintMate-Drucker von Thermo Scientific

Beschreibung	Bestellnummer
Sammelsystem	A79510014
Sammeltablett (4 Stück)	A79530063
Hopper	A79510004
Heißfolienband, 5 Rollen (1 Rolle reicht für ca. 20.000 Objektträger)	A79510013
Ausgaberutsche links	A79520007
Ausgaberutsche rechts	A79520008
Paket mit Schnittstellensoftware	A79510019
Paket mit Protokollsoftware	A79510020

**Abmessungen von PrintMate 900** (ohne Objektträgerschächte): (T x B x H): 40 x 48 x 23 cm

**Abmessungen von PrintMate 900** (mit Objektträgerschächten): (T x B x H): 40 x 48 x 90 cm

**Gewicht:** 14 Kg

©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. LabWriter ist eine Handelsmarke von Raymond A. Lamb Limited. Alle Handelsmarken sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. und zugehörigen Tochterunternehmen.

### Anatomical Pathology

#### U.S.A

+1-800-522-7270

Fax: +1-269-372-2674

#### Großbritannien

0800 0189396 +44-1928-562501

Fax: +44-1928-562627

[www.thermo.com/pathology](http://www.thermo.com/pathology)

#### Deutschland

PH: + 49 (0) 6103/408-1023

Fax: + 49 (0) 6103/408-1636

Im Steingrund 4-6

63303 Dreieich

M41000DE R4/08

**Thermo**  
SCIENTIFIC